


**medicon**<sup>®</sup>

---

C E R V I C A L   S P I N E

---

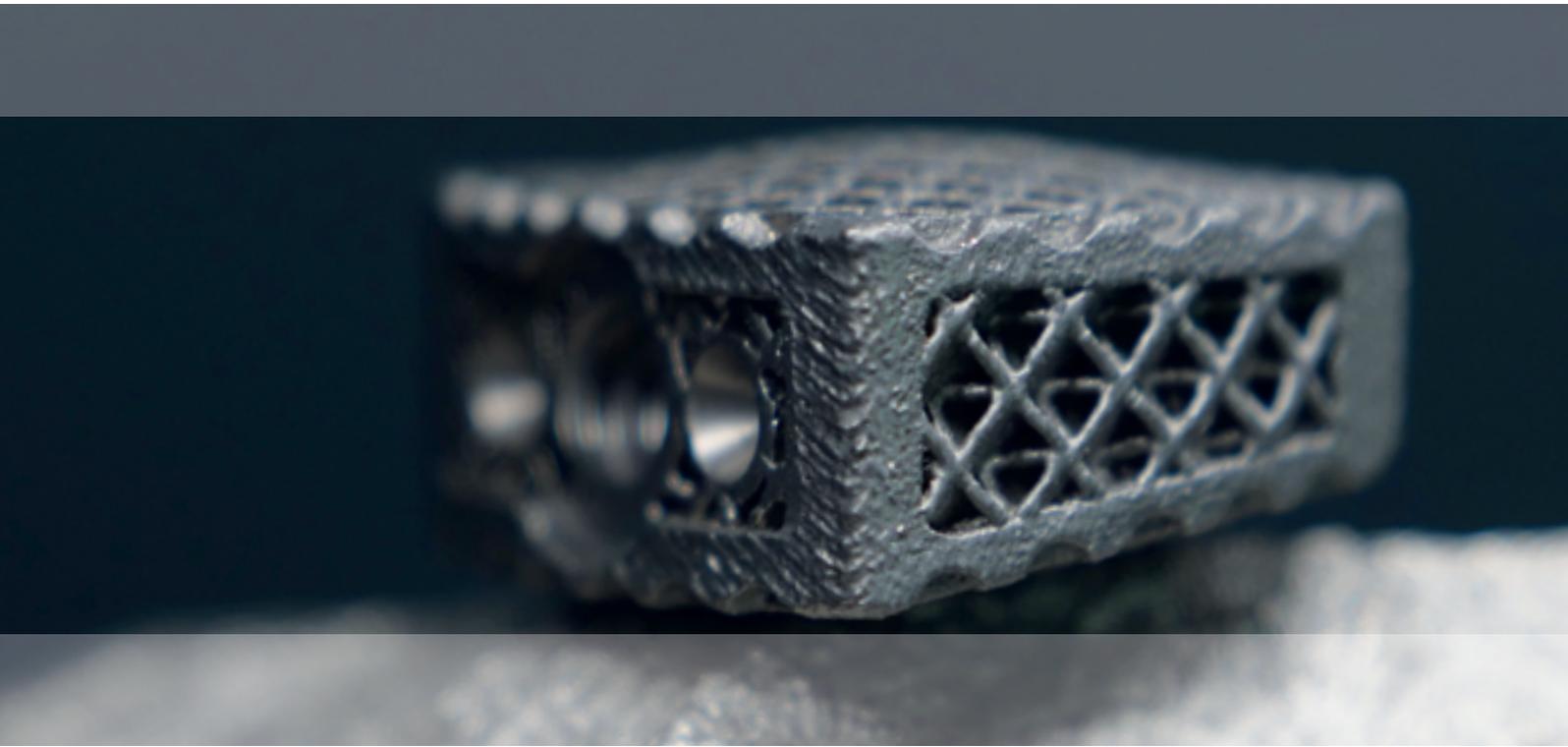

---



# MediCage<sup>®</sup> | 3D cervical

Implantat für die zervikale Wirbelsäule

---

# MediCage® | 3D cervical

Implantat für die zervikale Wirbelsäule

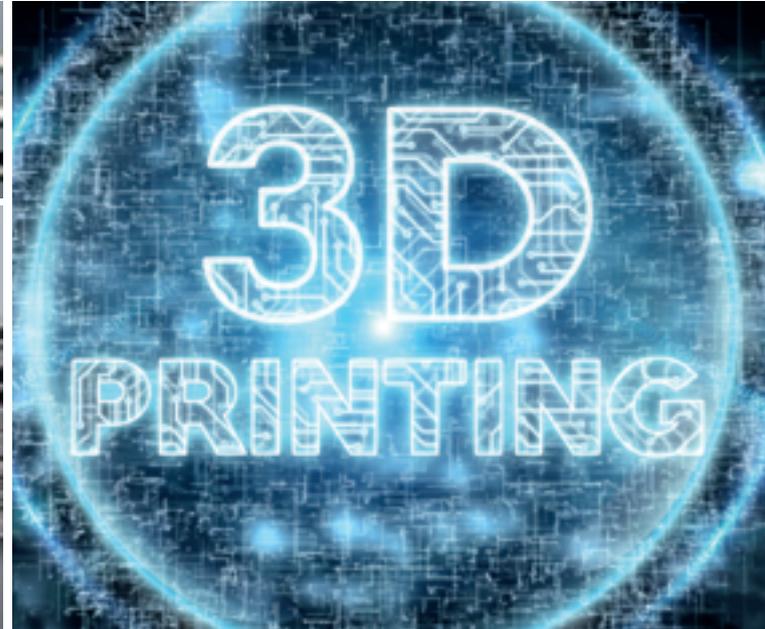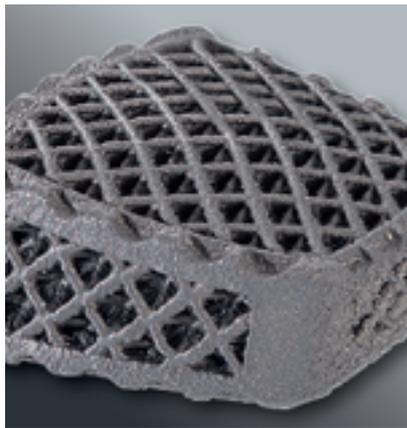

Gitterstruktur führt zur Osseointegration

Kein Abrieb beim Einbringen. Der 3D-Druck revolutioniert die Fertigung von Implantaten mit osseointegrativer Unterstützung im Heilungsprozess.

Kapillarwirkung


Gute Interaktion zwischen Implantat- und Knochenstruktur. Ermöglicht eine zügige Fusion der Wirbelkörper während des Heilungsprozesses.

8° Lordotisches Design

Das konvexe Design der kranialen Fläche des Cages sowie das gerade Design der kaudalen passen sich an die Anatomie der Wirbelkörperendplatten an. Das Implantatdesign bietet ein optimiertes Fusionsbett.

Umfangreiche Footprints-Optionen

Die Implantate sind in einer Vielzahl von Grundrissen mit **bis zu 6 Höhen-Variablen** erhältlich. Sie sind auf die unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten der Patienten abgestimmt – insbesondere unsere Cagebreiten von 18 mm und 20 mm.

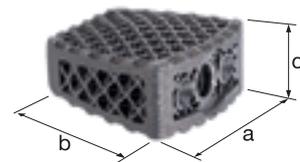

Cages in 21 Größen

	a x b x c
■	14 x 12 x 4.2 mm
■	14 x 12 x 5.0 mm
■	14 x 12 x 6.0 mm
■	14 x 12 x 7.0 mm
■	14 x 12 x 8.0 mm

	a x b x c
■	16 x 15 x 4.2 mm
■	16 x 15 x 5.0 mm
■	16 x 15 x 6.0 mm
■	16 x 15 x 7.0 mm
■	16 x 15 x 8.0 mm

	a x b x c
■	18 x 16 x 4.2 mm
■	18 x 16 x 5.0 mm
■	18 x 16 x 6.0 mm
■	18 x 16 x 7.0 mm
■	18 x 16 x 8.0 mm

	a x b x c
■	20 x 16 x 4.2 mm
■	20 x 16 x 5.0 mm
■	20 x 16 x 6.0 mm
■	20 x 16 x 7.0 mm
■	20 x 16 x 8.0 mm
■	20 x 16 x 9.0 mm

Medicon eG

Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen · Germany · Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50 · E-Mail: sales@medicon.de · Internet: www.medicon.de