
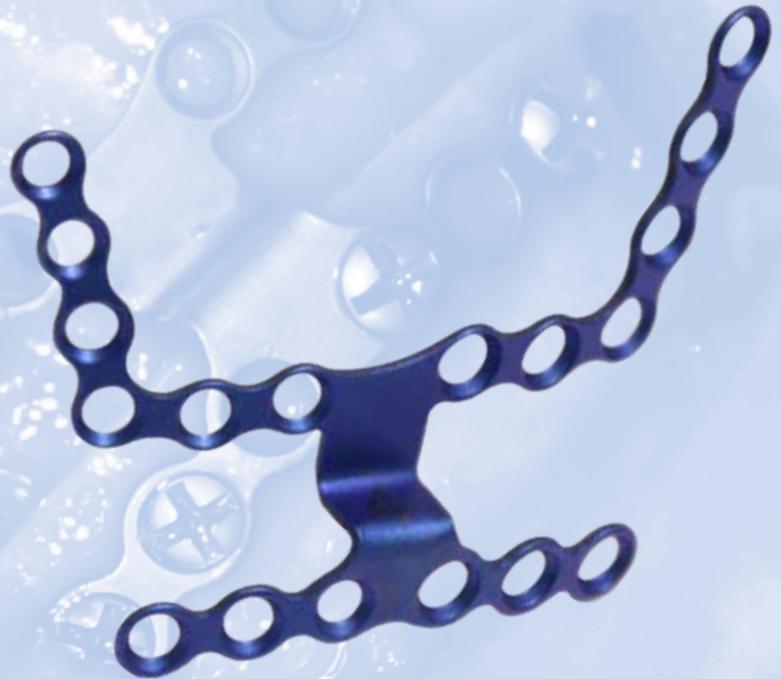


Le Fort I Platte nach Prof. Rustemeyer

Zur Fixierung bei orthognathischen Oberkieferumstellungsosteotomien

Entwicklungspartner:

Prof. Dr. Dr. Jan Rustemeyer, Klinikum Bremen-Mitte

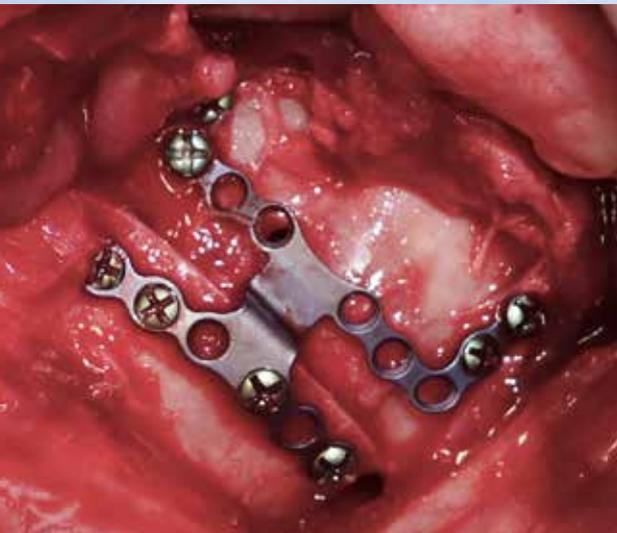

Vorteile:

- » Fixierung der Platte erfolgt paranasal und im Bereich der Jochbeinprominenz und **ersetzt die Applikation der Mini L- und T-Platten**, wodurch der Arbeitsschritt des aufwendigen Biegens der Platten entfällt
 - » Im Vergleich dazu werden **weniger Implantate** benötigt und **OP-Zeit gespart**
- » Platte kann aufgrund ihres speziellen Designs auch bei **besonders anspruchsvollen Anatomien** eingesetzt und entlang der Belastungspfeiler positioniert werden
- » **Minimale Ertastbarkeit** durch MICRO Plattenstärke
- » Die H-Form des Plattendesigns **erhöht die Stabilität**, weshalb auf die Stärke von **MICRO-Platten** zurückgegriffen werden kann
- » **Anwendung** der Platte sowohl auf der **rechten und linken** Seite des Oberkiefers führt zu **geringeren Lagerhaltungskosten** im Vergleich zu herkömmlichen Platten in diesem Bereich




CMF

medicon[®]

Medicon eG · Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0 · Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50
E-Mail: sales@medicon.de · Internet: www.medicon.de · Germany

Le Fort I Platte nach Prof. Rustemeyer

Entwicklungspartner:
Prof. Dr. Dr. Jan Rustemeyer, Klinikum Bremen-Mitte

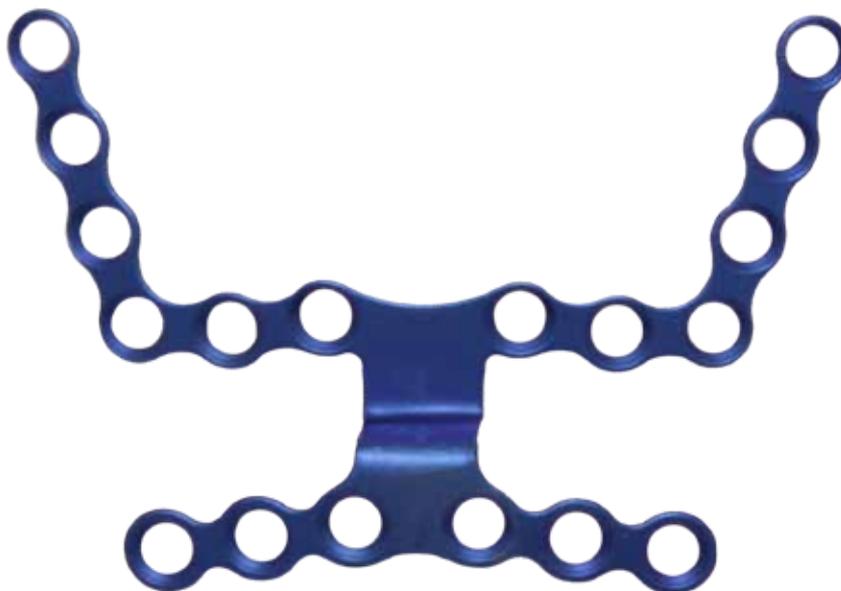

Le Fort I Platte nach Prof. Rustemeyer

0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
P	P	P	P
3mm Steg	4mm Steg	5mm Steg	6mm Steg
68.84.80	68.84.81	68.84.82	68.84.83
68.84.80A	68.84.81A	68.84.82A	68.84.83A



Weitere interessante Produkte für die Osteosynthese finden Sie in unserem Katalog **450.00.61 implantArt Osteosynthese** und unter www.medicon.de

Ergänzende Produkte:



75.23.50 Schraubendrehergriff



75.23.19 Schraubendreherklinge


Titan-Schrauben für MICRO-System:



c
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm




Self-drilling
Ø 1,5 mm
68.85.83A
68.85.84A
68.85.85A
68.85.86A

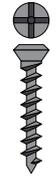

Self-tapping
Ø 1,5 mm
68.85.43A
68.85.44A
68.85.45A
68.85.46A

Spiralbohrer:

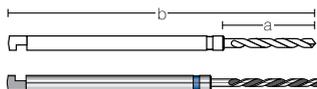

a = 4 mm b = 46 mm 68.76.31
a = 6 mm b = 48 mm 68.76.32



68.24.06 Osseoskalpell mit Schlüssel

Not all products illustrated in this documentation are available for sale in all countries. Please contact your local distributor for more information. The products of Medicon eG, Tuttlingen advertised on this product information comply with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC (MDD). <https://ra.medicon.de>



Verpackungseinheit "X" Stück



Plattenstärke



mit "TraceID"-Pin